


COMPACTO

ESTERILIZADORES

21-42 LITROS

54 LITROS

12 LITROS

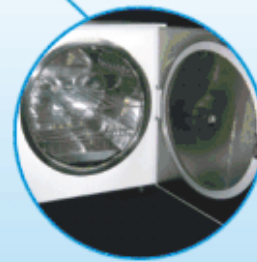

PRINCIPALES FUNCIONES:

- Esterilización y secado
- Microprocesado , 10 niveles de alarmas
- 08 ciclos de esterilización, 05 con secado y 01 extra sólo secado para mejor performance con la puerta cerrada
- Panel digital con display alfanumerico
- Válvulas de seguridad para sobre temperatura y termostato de seguridad
- Cámara en acero inoxidable 316L con canastillas removibles

DATOS TÉCNICOS:

ESPECIFICACIÓN:

Autoclave de mesa horizontal microprocesada totalmente automática.

INDICACIÓN:

Hospitales, Clínicas Odontológicas, Veterinarias, Cirugía Plástica, Laboratorios, Controles de calidad y otros

APLICACIÓN:

Esterilización y secado de instrumentos quirúrgicos, utensilios, tejidos, guantes, líquidos, vidrios etc.

CONSTRUCCIÓN:

Cámaras cilíndricas y rectangulares hechas conforme las reglas vigentes de la ABNT

COMPACTO

ESTERILIZADORES

EQUIPADAS CON:

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN - Monitorea la presión interna de la cámara

SENSOR PT100 - Monitorea la temperatura interna de la cámara
VISOR - Digital alfanumérico, muestra presión, temperatura, ciclos y alarmas.

SISTEMA HIDRÁULICO:

FILTROS - Elemento filtrante en acero inoxidable

VÁLVULAS SOLENÓIDES - Hechas en latón forjado en sistema de diafragma

VÁLVULAS DE SEGURIDAD - Hechas en latón para casos de sobrepresión

CONEXIONES - Hechas en cobre

BOMBA DE VACÍO - Opcional en el modelo de 42 litros e ítem de línea en los modelos 54 litros

TABLA COMPARATIVA

CARACTERÍSTICAS		12 L	21 L	42 L	54 L
Estructura	Cámara	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
	Formato	Cilíndrico	Cilíndrico	Cilíndrico	Rectangular
Porta	Sistema de Cierre	Dispositivo excêntrico	Duplo por traba y manípulo	Duplo por traba y manípulo	Volante central
		Temperatura	121 y 127°C	121 y 127°C	121 y 127°C
Ciclos	Presión	1,09 - 1,5 Kg/cm ²	1,09 - 1,5 Kg/cm ²	1,09 - 1,5 Kg/cm ²	1,09 - 1,5 Kg/cm ²
	Número de ciclos	8	8	8	8
	Ciclo extra de secado	Si	Si	Si	Si
	Secado con puerta cerrada	Si	Si	Si	Si
	Secado	Radiación de calor	Radiación de calor	Radiación de calor	Vacío
Datos Tecnicos	Potência	1200 watts	1600 watts	2000 watts	4400 watts
	Voltagen	110 o 220 VCA	110 o 220 VCA	110 o 220 VCA	110 o 220 VCA
Instrumentaciones	Comando	Microprocesado	Microprocesado	Microprocesado	Microprocesado
	Indicador de presión	Analógico	Digital	Digital	Digital
	Indicador de Temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Alarmas	Alarmas Audio-visuales	Si	Si	Si	Si
Periféricos	Impresora	no	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones Internas	Alto/Diametro	215 mm	300 mm	300 mm	300 mm
	largo	no	no	no	300 mm
	Fondo	365 mm	300 mm	600 mm	600 mm
Dimensiones Externas	Alto	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
	Largo	315 mm	545 mm	545 mm	600 mm
	Fondo	478 mm	430 mm	720 mm	760 mm
Accesorios	canastillas /carro Interno	02 canastillas	03 canastillas	03 canastillas	carro interno 02 pisos